



病理切片扫描仪操作流程

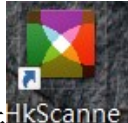


1. 打开电脑桌面上的扫描软件HkScanner，同时在仪器背面右边找到开关并按下听到一声较长的蜂鸣声表示仪器也已经开启
2. 确认软件是否与硬件连接成功，如图中红框则表示成功

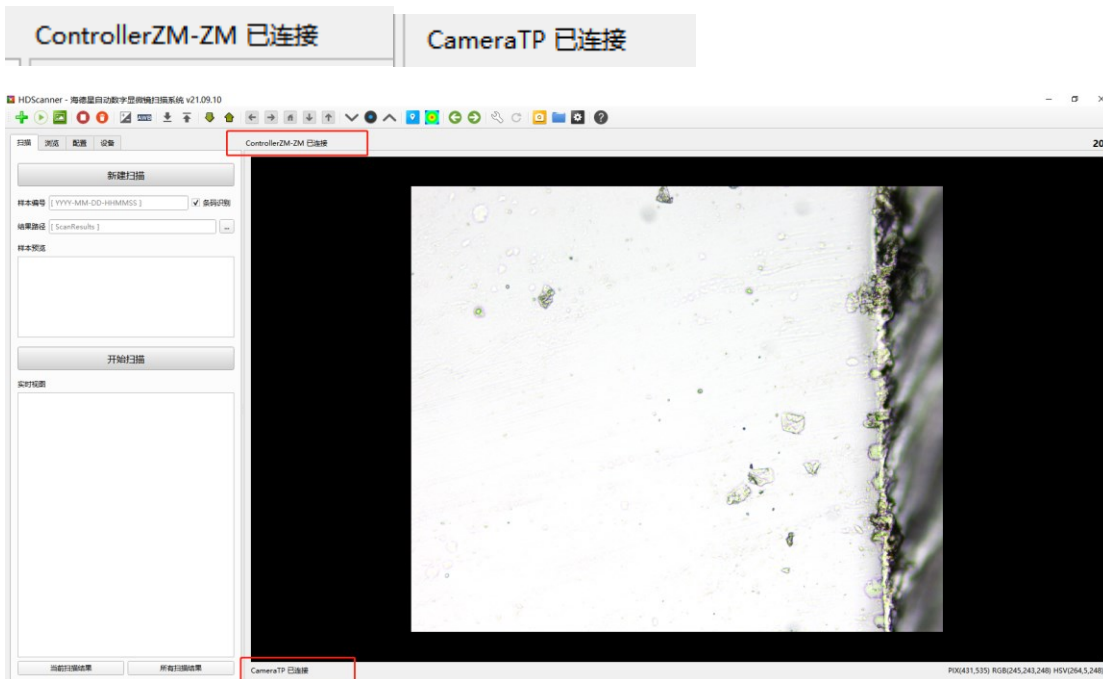

3. 将需要扫描的玻片按图所示放入玻片夹中（玻片标签处或磨砂处朝上!!）



4. 将玻片夹按图所示放入仪器右边的进样库中（玻片夹缺口处朝左!!）

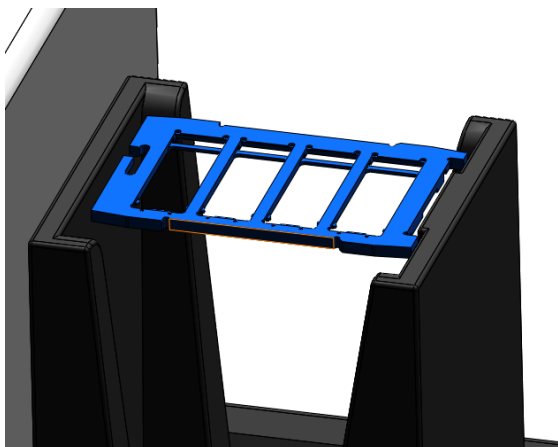

5. 点击“新建扫描”拍摄预览图片
6. 点击“开始扫描”
7. 点击“浏览”查看扫描后的图片；

右击左边的缩略图可以对此扫描图片进行重命名；


搜索栏中输入可以重命名后的名称可以对图片进行检索；



滑动滚轮可以对图片任意放大缩小或在缩放选项中选择需要的倍数；




保存视图 保存视图可以对当前屏幕所显示的局部图片进行保存

8. 关机时请确认玻片夹已经不在扫描仪中，如果玻片夹还在镜下点击  出片按钮，等玻片夹从左侧出来后，关闭机器即可。

病理信息管理系统快速上手

登录

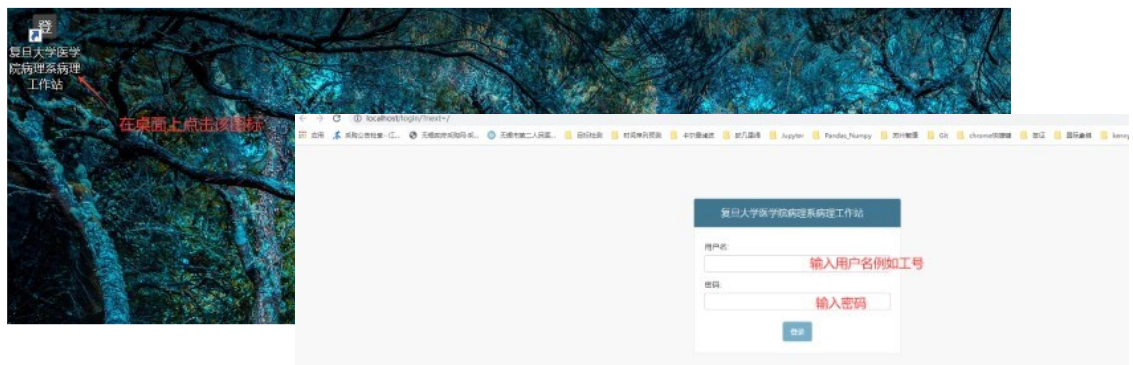

在线帮助请加微信



增



OR



增(注意事项)

附件

解除记录:

选择文件

未选择任何文件

PPT:

选择文件

未选择任何文件

其他文档:

选择文件

未选择任何文件

病理图片集

添加另一个病理图片

如果病理图片很大，例如超过1G，那一次莫要添加超过一张

保存并添加一个

保存并继续编辑

保存

一般情况保存很快，但是图片很大的情况下，保存略慢

删

复旦大学医学院病理系病理工作站

权限: 删除 查看记录 / 修改密码 / 注销

病理信息管理 - 病人组

新建病人组

病人组

添加

删除图片集

添加

选择病人来编辑

Q

搜索

操作

选择 2 个中的 1 个

☐

删除所选的病人组

55

遗传系谱

A3312

2017年6月16日

2017年6月18日

张医生

解除记录

A00001解除记录.doc

XXXXX3771.n ppt

C

张医生

☒

超清组

男

60

遗传系谱

A4119

2017年6月16日

2017年6月18日

张医生

解除记录

A00001解除记录.doc

XXXXX.ppt

C

张医生

2 病人组

修改器

以 性别号数

搜索

以 解组号数

搜索

以 死亡原因

搜索

改

复旦大学医学院病理系病理工作站

病例、病理报告管理、病人集

病理报告管理

病人集

病理报告管理

选择病人来编辑

Q

搜索

操作

病人姓名

性别

年龄

病例来源

病例号数

死亡日期

解剖日期

解剖医生

解剖记录

PPT

病理图片列表

诊断报告

记录创建者

老胡

男

55

急诊科

A3312

2017年6月24日

2017年6月18日

张医生

XXXXX尸检解剖记录_102010M.doc

XXXX_3771.in ppt

张医生

胡国玲

男

80

急诊科

A6118

2017年6月24日

2017年6月18日

张医生

XXXXX尸检解剖记录.doc

XXXX.ppt

张医生

2 病人集

搜索

以名称搜索

搜索

以解剖日期

搜索

以死亡原因

搜索

点击病人姓名进入修改页面

查

复旦大学医学院病理系病理工作站

病例、病理报告管理、病人集

病理报告管理

病人集

病理报告管理

选择病人来编辑

Q

搜索

操作

病人姓名

性别

年龄

病例来源

病例号数

死亡日期

解剖日期

解剖医生

解剖记录

PPT

病理图片列表

诊断报告

记录创建者

老胡

男

55

急诊科

A3312

2017年6月24日

2017年6月18日

张医生

XXXXX尸检解剖记录_102010M.doc

XXXX_3771.in ppt

张医生

胡国玲

男

80

急诊科

A6118

2017年6月24日

2017年6月18日

张医生

XXXXX尸检解剖记录.doc

XXXX.ppt

张医生

2 病人集

搜索

以名称搜索

搜索

以解剖日期

搜索

以死亡原因

搜索

此四处可以点击排序

此三处也可用于搜索

此处可输入各种信息进行搜索，例如
病人姓名：老胡、贾
死亡日期：2017、2017-06、06-28
解剖医生姓名：张
解剖医生姓名：柏芝
医生工号：06888
解剖诊断、死亡原因等等